


Patient Information

ID	#####	主治医	
性別	男性	検者	
年齢	45歳	手術日	##年 ##月 ##日
診断および術式	左中大脳動脈瘤、開頭脳動脈瘤頸部クリッピング術（左側頭開頭手術）		
Comment	<p><u>記録電位</u> MEP, Direct MEP</p> <p><u>記録部位（モニタージュ）</u> MEP: 上肢：小指外転筋(左)、短拇指外転筋(右) 下肢：母趾外転筋（左右）、前脛骨筋（左右）、腓腹筋（左右）</p> <p><u>モニタリングの概略</u> 硬膜切開後、硬膜下に直接電極を設置、術中に直接電極がずれたため、波形消失している。再度設置し波形描出確認。クリップ中波形変化認めず。終了時まで波形変化認めず。</p> <p><u>トラブルシューティングなど追記することがあれば記入してください。</u></p>		

赤字で示した箇所の明記が必須です。

MEP (No 1)

添付された波形データには、潜時及び振幅のスケール、刺激強度が表示されていること。ない場合は余白に記入してください。

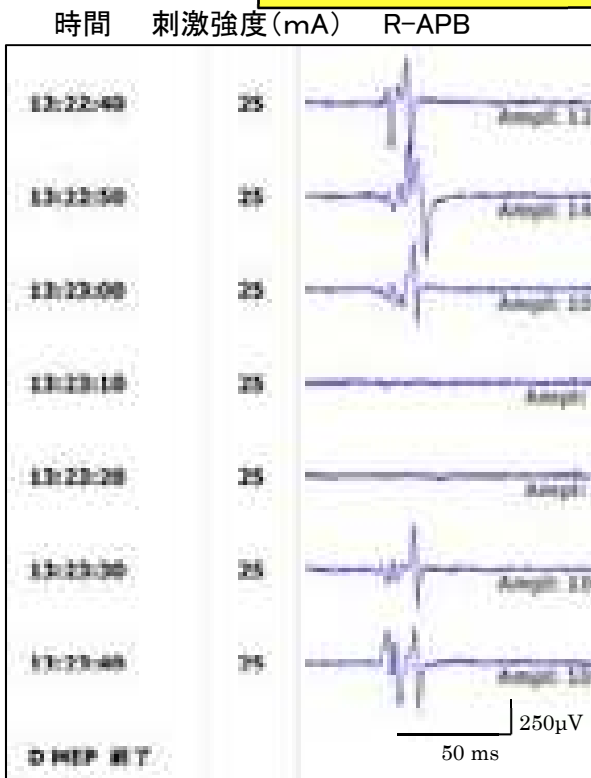

申請者の署名（記名）が必要です。

Signature ○ × △ □

Patient Information

MEP (No2)

時間 刺激強度(mA)

Time	[mA]	L: R.ADM	L: R.前頭骨	L: R.頰部筋	L: R.AH	R: L.APB	R: L.前頭骨	R: L.頰部筋	R: L.AH
硬膜切開後	/								
18:01:17	-174/	Ampl: 100%	Ampl: 100%	Ampl: 100%	Ampl: 100%				
18:01:18	/174					Ampl: 100%	Ampl: 100%	Ampl: 100%	Ampl: 100%
18:11:58	-173/	Ampl: 111%	Ampl: 111%	Ampl: 98%	Ampl: 116%				
18:11:59	/174					Ampl: 79%	Ampl: 71%	Ampl: 71%	Ampl: 115%
18:23:26	-173/	Ampl: 103%	Ampl: 97%	Ampl: 93%	Ampl: 92%				
18:23:27	/173					Ampl: 72%	Ampl: 70%	Ampl: 92%	Ampl: 141%
18:44:40	-171/	Ampl: 92%	Ampl: 57%	Ampl: 37%	Ampl: 43%				
18:44:41	/172					Ampl: 89%	Ampl: 62%	Ampl: 64%	Ampl: 103%
18:48:15	-101/	Ampl: 21%	Ampl: 3%	Ampl: 3%	Ampl: 1%				
18:48:16	/101					Ampl: 24%	Ampl: 1%	Ampl: 3%	Ampl: 1%
19:40:50	-170/	Ampl: 85%	Ampl: 62%	Ampl: 34%	Ampl: 68%				
19:40:51	/171					Ampl: 78%	Ampl: 49%	Ampl: 69%	Ampl: 91%
20:23:37	-176/	Ampl: 98%	Ampl: 42%	Ampl: 37%	Ampl: 60%				
20:23:38	/176					Ampl: 81%	Ampl: 43%	Ampl: 66%	Ampl: 101%
21:01:30	-176/	Ampl: 95%	Ampl: 69%	Ampl: 67%	Ampl: 55%				
21:01:31	/177					Ampl: 75%	Ampl: 54%	Ampl: 99%	Ampl: 133%
21:51:22	-176/	Ampl: 96%	Ampl: 70%	Ampl: 30%	Ampl: 63%				
21:51:23	/177					Ampl: 74%	Ampl: 73%	Ampl: 85%	Ampl: 122%
22:38:52	-175/	Ampl: 107%	Ampl: 68%	Ampl: 25%	Ampl: 64%				
22:38:53	/176					Ampl: 74%	Ampl: 77%	Ampl: 130%	Ampl: 151%
23:47:34	-174/	Ampl: 108%	Ampl: 18%	Ampl: 8%	Ampl: 57%				
23:47:35	/174					Ampl: 89%	Ampl: 56%	Ampl: 101%	Ampl: 141%
23:51:35	-174/	Ampl: 102%	Ampl: 27%	Ampl: 12%	Ampl: 86%				
23:51:36	/175					Ampl: 76%	Ampl: 54%	Ampl: 64%	Ampl: 130%
23:54:58	-181/	Ampl: 108%	Ampl: 68%	Ampl: 28%	Ampl: 55%				
23:54:59	/175					Ampl: 86%	Ampl: 51%	Ampl: 83%	Ampl: 136%
終了時	/								
00:16:32	-188/	Ampl: 119%	Ampl: 122%	Ampl: 34%	Ampl: 69%				
00:16:33	/176					Ampl: 92%	Ampl: 42%	Ampl: 66%	Ampl: 129%
18:01:18	/174	Ampl: 2322	Ampl: 179	Ampl: 224	Ampl: 466	Ampl: 3774	Ampl: 603	Ampl: 284	Ampl: 1012
SNS/div		1000 $\mu$ V	100 $\mu$ V	100 $\mu$ V	200 $\mu$ V	2000 $\mu$ V	200 $\mu$ V	200 $\mu$ V	1000 $\mu$ V
TB [ms/div]		10	10	10	10	10	10	10	10
StimName		MEP Left	MEP Left	MEP Left	MEP Left	MEP Right	MEP Right	MEP Right	MEP Right
LF-HF [Hz]		30 - 1500	30 - 1500	30 - 1500	30 - 1500	30 - 1500	30 - 1500	30 - 1500	30 - 1500
Notch/Avg		Off / 3 point	Off / 3 point	Off / 3 point	Off / 3 point	Off / 3 point	Off / 3 point	Off / 3 point	Off / 3 point

申請者の署名(記名)が必要です。

Signature

○ × △ □